

Fiche Pellet 002905



**Barre de relèvement droite Pellet - Ø
25 mm - 500 mm**

Réf 002905

79.39€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61888-barre-de-relevement-droite-pellet-o-25-mm-500-mm-pellet-002905.html>

*Le produit Barre de relèvement droite Pellet - Ø 25 mm - 500 mm
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique



Informations


Désignation	Barre droite 500 mm, Laiton Chromé, Ø 25 mm
Référence	002905



Les + produit

+ **Garantie totale anticorrosion.**

Description

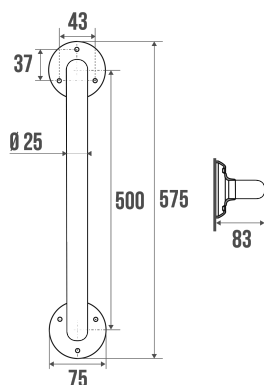

Fixations apparentes.
Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm.
Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

Caractéristiques techniques

Matière	Laiton
Finition	Nickelé Chromé
Dimensions	500 mm
Diamètre Ø	25 mm
Poids brut	0.580 kg
Conditionnement	Sachet plastique neutre
Charge admissible	80 kg
Tests laboratoire à	200 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390029053
Code douanier	7418200090
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★☆☆
Relevage	★★☆☆☆
Transfert	★★☆☆☆

Caractéristiques

Horizontal	★★★☆☆
Vertical	★★★☆☆
Oblique	★★☆☆☆
Anticorrosion	★★★★★

Type d'utilisation

Bain	★★★☆☆
Douche	★★★☆☆
WC	★★☆☆☆
Vestiaire/Cabine	★★★☆☆

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★☆☆☆
ERP/IOP	★★☆☆☆
Habitats privés	★★★☆☆
Lieux de travail	★★★☆☆

Fiche produit mise à jour le : 29/06/2021